

④ Téléphonie

L'EG100 est un appareil téléphonique de maison qui permet de faire et recevoir des appels.

Faire un appel

Décrocher le combiné ou appuyer la touche < Main libre > :

- Composez un numéro de téléphone
- Appuyer sur une des touches < Services >
- Appuyer < Rappel > pour recomposer le numéro

Répondre

3 façons de répondre à un appel :

- Décrocher le combiné de l'EG100
- Appuyer sur la touche < Main libre >
- Appuyer sur la touche < Flash > de l'appel en attente

- Volume +

Ajustement du volume en < Main libre >.

⑤ Services


M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

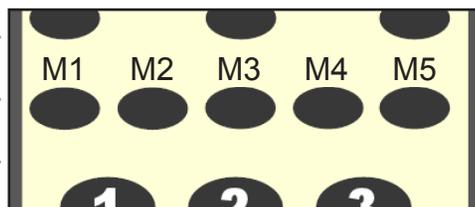


Touches de composition rapide



La santé et sécurité EG-Alert
(877) 333-8934

Unité d'urgence multi-fonctionnel EG100 Résidences

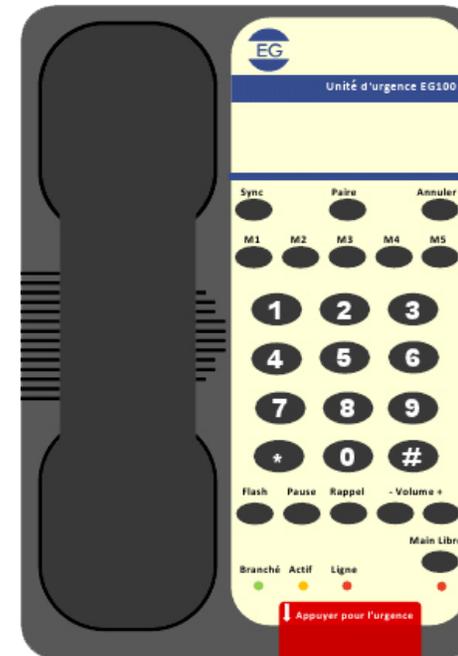

① Installation EG100

② Supervision 24/7

③ Télésurveillance

④ Téléphonie

⑤ Services

Guide de l'utilisateur

www.electroniquegiant.com

① Installation EG100

Branchements

3 composantes à brancher :

- Combiné téléphonique
- Transformateur électrique
- Câble téléphonique

Tests

Tests de fonctionnement :

- Appuyez sur le bouton bracelet ou pendentif
- Appuyez sur la plaque murale ou la tirette
- Appuyez sur le bouton rouge lumineux de l'EG100

Urgence

Procédure d'urgence en 3 étapes :

- Communication de l'origine de l'urgence (10-12 sec)
- Escalade de l'urgence au groupe de répondants
- Sauvegarde des données de l'urgence chez EG

② Supervision 24/7

Les équipements EG sont supervisés 24/7 pour un environnement de vie sécuritaire :

- Fonctionnement des équipements EG
- Escalade de la réponse d'urgence
- Rapports administratifs

③ Télésurveillance

Avoir de l'AIDE

EG100 émet un son calme pour indiquer l'urgence déclenché après avoir appuyé :

- Bouton bracelet ou pendentif
- Plaque murale ou tirette
- Bouton rouge lumineux de l'EG100

Annuler

Vous appuyez sur la touche < **Annuler** > en haut à droite, pour terminer la demande d'AIDE « appel d'urgence » ou d'annuler les touches de programmation < **Sync** > et < **Paire** >.

Lumière VERTE

La lumière verte allumée, indique que l'EG100 est < **Branché** > dans la prise électrique.

Lumière AMBRE

La lumière ambre clignotante indique que l'EG100 est en mode de télésurveillance < **Actif** >.

Lumière ROUGE

La lumière rouge allumée indique que la < **Ligne** > téléphonique est utilisée.

** S'il n'y a pas de services téléphoniques, la lumière jaune ne clignote pas et l'appareil annonce « ligne téléphonique débranchée » lors de l'utilisation de l'EG100.*